


NOTICE D'UTILISATION


VERTICALISATION

 **WATT'UP**

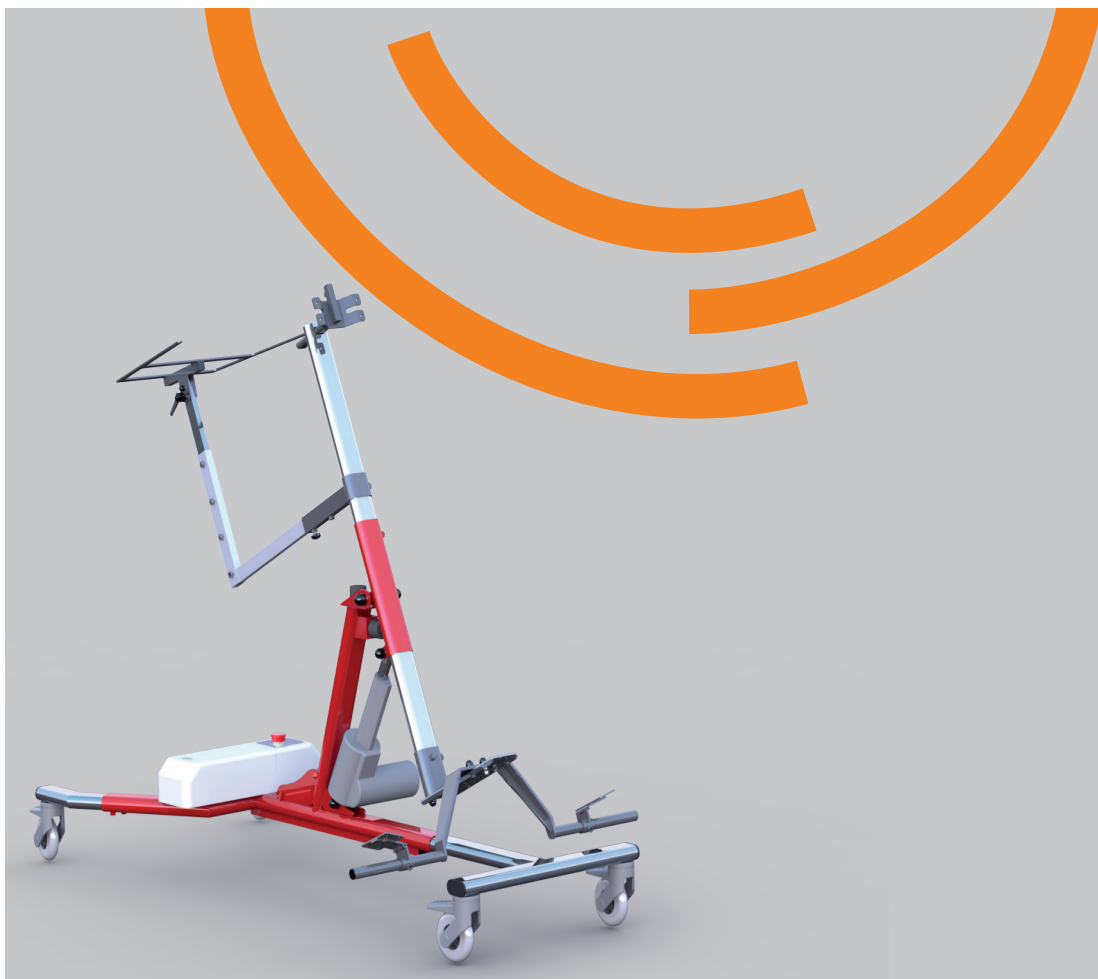

SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation	p.3
Utilisation prévue	p.3
Restriction d'utilisation / précautions d'emploi mises en garde spéciales	p.3
Description produit	p.3-5
Montage/ réglages	p.5-10
Adjonctions	p.10-11
Entretien / stockage /mise au rebut	p.12
Garantie	p.12
Identification	p.13
Mentions légales	p.14

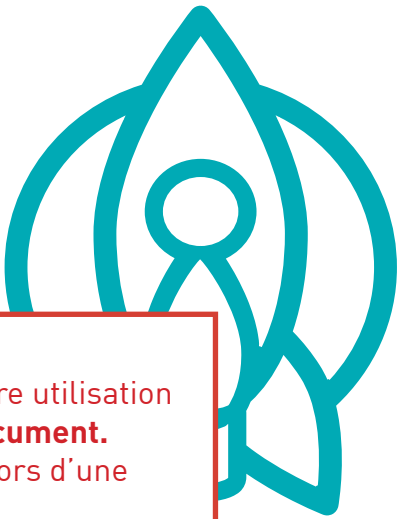

Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.**
La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

UTILISATION PRÉVUE

Avec le Watt'Up, le passage de la position verticale à la position horizontale est facilitée par l'assistance vérin électrique. Ce système dispose de toutes les possibilités de fixation avec des pièces redimensionnées pour accueillir les coques de grandes tailles. Ce socle permet de recevoir des coques, réalisées sur moulage et s'adaptant parfaitement à la morphologie d'un patient. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier. Les coques peuvent être placées en position ventrale ou dorsale. Le Watt'Up est prévu pour une utilisation exclusivement en intérieur.

RESTRICTION D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Watt'Up doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est conçu pour une utilisation en intérieur, sur un sol lisse et plat. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants.
- Les roulettes de l'appareil sont munies de freins; les utiliser dans les cas suivants: avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.

 **Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.**

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante de verticalisation disponible en **1** taille et plusieurs coloris.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	Largeur arrière	Longueur	Hauteur du mât position allongée	Poids max.	Choix de la taille en fonction de la hauteur sol/entre-jambes
T1	850 à 1050 mm	1130 à 1800 mm	680 mm	100 kg	500 à 750 mm



MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.

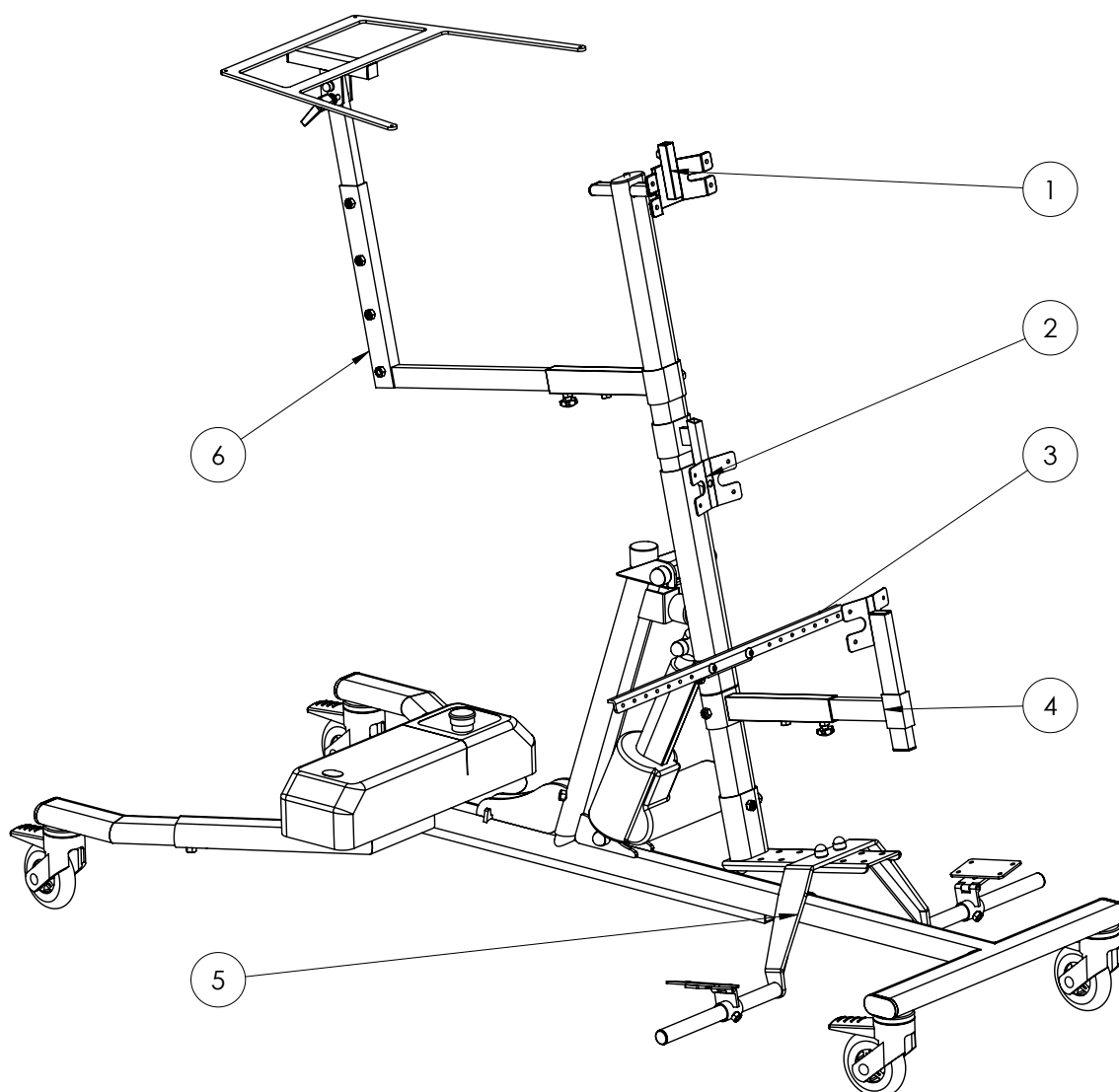

N° article	Référence	Description	Qté
1	PAP 08	Fixation supérieure de coque	1
2	WAT 01	Fixation de coque supplémentaire	1
3	WAT 02	Barre d'abduction	1
4	WAT 05	Appui fessier (pour coque antérieure)	1
5	WAT 03	Fixation inférieure de coque renforcée à charnières	1
6	WAT 09	Ensemble support tablette grand modèle	1

CETTE BASE EST LIVRÉE AVEC :

PAP 08 A	Fixation supérieure de coque sans charnière
PAP 08 B	Fixation supérieure de coque sur charnière
WAT 03	Fixation inférieure de coque renforcée, à charnières
WAT 09	Ensemble support tablette

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

WAT 01 A	Fixation supplémentaire modèle A
WAT 01 B	Fixation supplémentaire modèle B
WAT 01 C	Fixation supplémentaire modèle C
WAT 02	Barre d'abduction
WAT 05	Appui fessier (version antérieure)
TB 001	Tablette largeur 560mm, profondeur 500mm
TB 002	Tablette largeur 680mm, profondeur 600mm


CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi que les **vérins** et **batteries** sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.

MONTAGE/ RÉGLAGES

 **Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.**


RÉGLAGE DE L'EMBASE

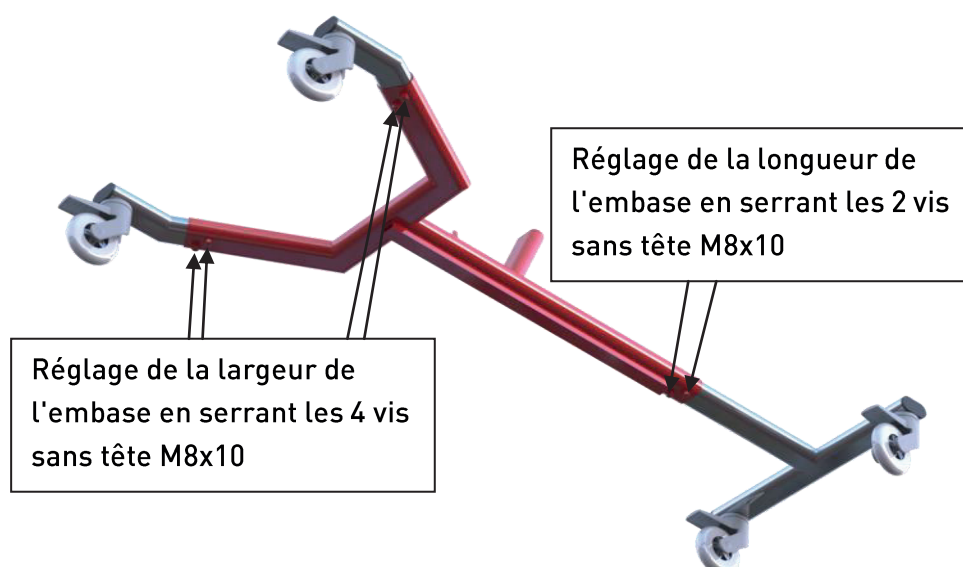

UTILISATION DES FREINS INTÉGRÉS AUX ROULETTES

⚠ Attention : Penser à verrouiller les freins avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.


Appui sur la languette de la roulette pour actionner le frein (verrouillage en rotation de la roue et de la chape)

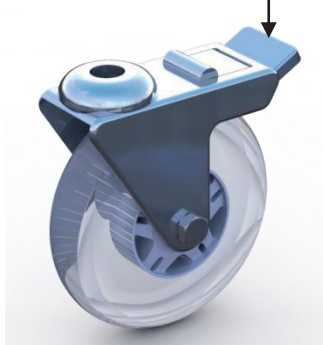


Appui sur la partie arrière de la languette pour déverrouiller le frein



MONTAGE DU COMPAS

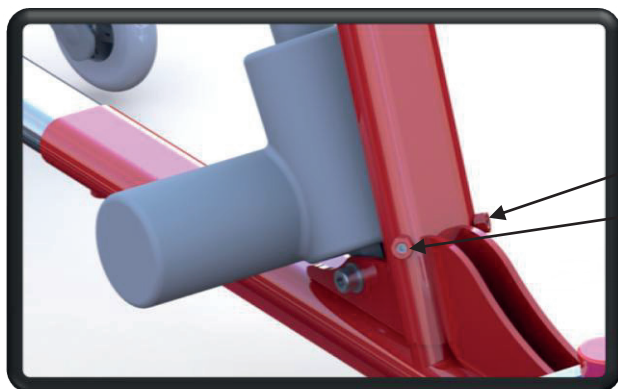


Insérer le compas sur le guide à 20° de l'embase, venir bien en contact à plat sur l'embase, puis serrer les 2 vis sans tête

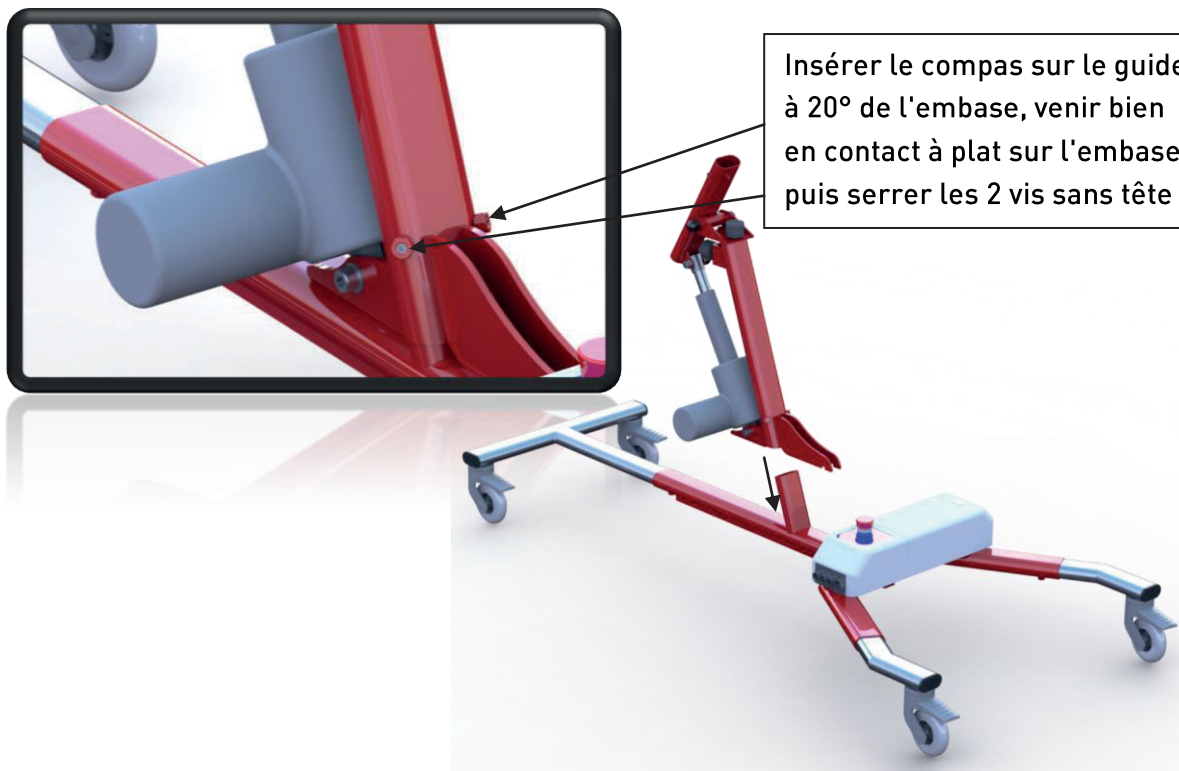

RÉGLAGE DU MÂT



FIXATION INFÉRIEURE DE COQUE

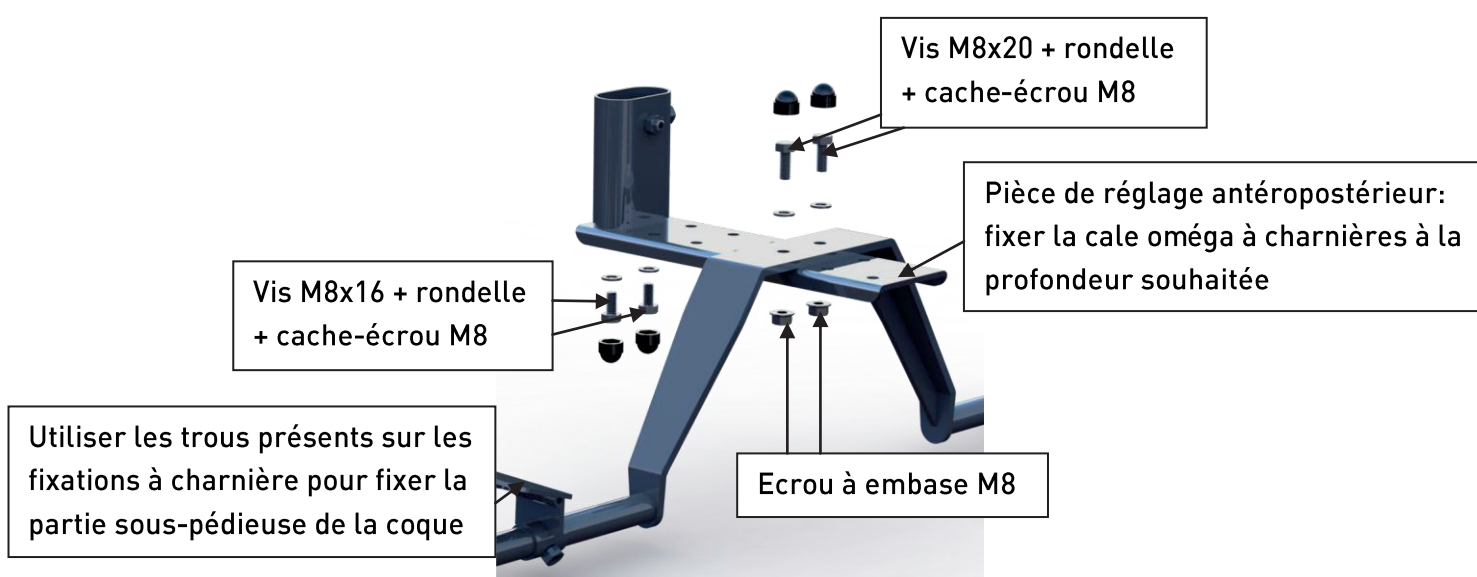

INSERTION FIXATION INFÉRIEURE DE COQUE



FIXATION SUPÉRIEURE DE COQUE




⚠ Attention : Le Watt'Up est équipé d'un vérin électrique; pour un équilibre des forces optimal et autant que possible, veiller à placer le patient de telle sorte que son centre de gravité se situe au plus près de l'axe de rotation de l'appareil. Si le patient est positionné haut et que son poids est important, il est possible de devoir aider le vérin électrique dans la manipulation, en particulier pour passer de la position horizontale à la position verticale. **Immobilisez l'appareil grâce aux freins intégrés aux roulettes avant toute manipulation.** Les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié.

Veiller à respecter les préconisations détaillées dans la notice d'utilisation de la batterie fournie avec l'appareil. Entre autre, pour une utilisation durable de la batterie, il est demandé de ne pas effectuer de charge partielle; quand une charge est entamée, attendre que la batterie soit pleine avant de débrancher le câble d'alimentation.


UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE:

Garder le bouton de gauche appuyé pour "ouvrir" le vérin (passer de la position verticale à la position horizontale). Le relâcher à la position souhaitée.

Garder le bouton de droite appuyé pour "fermer" le vérin (passer de la position horizontale à la position verticale). Le relâcher à la position souhaitée.

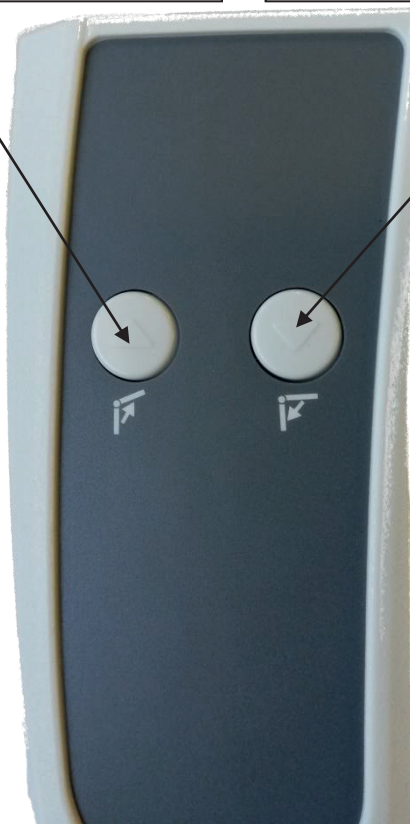


SUPPORT TABLETTE

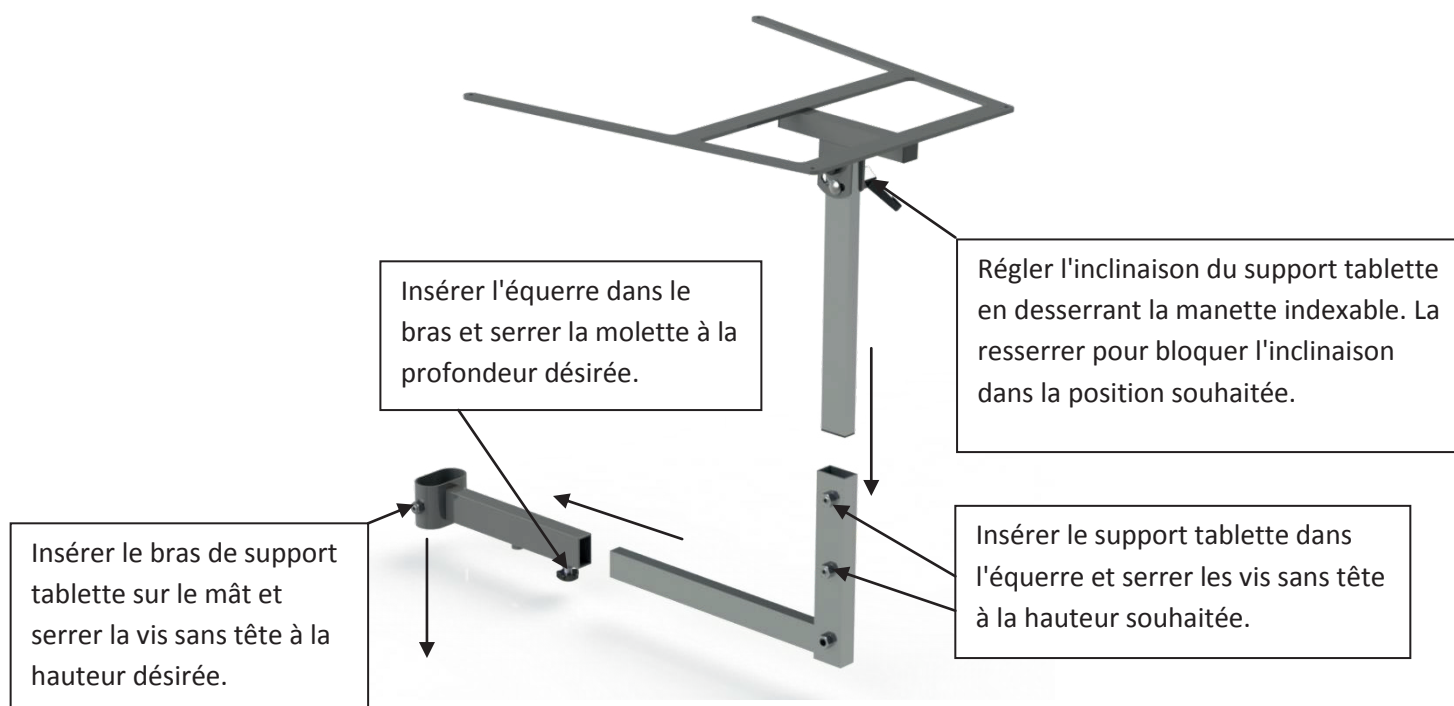

ADJONCTIONS

FIXATION SUPPLÉMENTAIRE DE COQUE

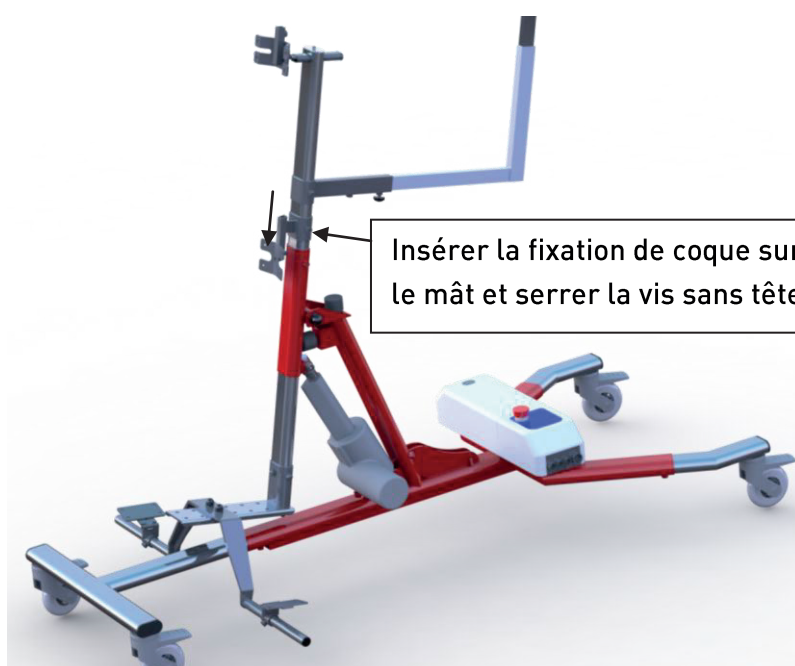

BARRE D'ABDUCTION



Faire coulisser la barre d'abduction sur le mât et serrer la vis sans tête à la position souhaitée.

APPUI FESSIER

Insérer l'appui fessier sur le mât, serrer les 2 vis sans tête pour la hauteur et la molette pour la profondeur.



ENTRETIEN / STOCKAGE / MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrissant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.

IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont - 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 – Fax : 04 67 95 06 94 – Mail : administration@recfrance.com
Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document : *NU_Watt'Up_071022-V4*

N° de série :

Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement



MENTIONS LÉGALES

La conception générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire et tout autre élément composant le produit sont la propriété exclusive de RECFRANCE et/ou de ses fournisseurs.

Visuels non contractuels.

Tout incident grave survenu avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi.

DATE D'ACHAT : / /

CACHET DU REVENDEUR :



CE

100

[illegible]



REC FRANCE
Innovater pour Libérer

136 ancienne route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél. : 04.67.95.04.50
Fax : 04.67.95.06.94

