

SPYRO


Support de verticalisation adolescent et adulte

Doté du système innovant **Up&Turn**, la manipulation du SPYRO est significativement facilitée par rapport aux autres verticalisateurs de sa catégorie. En effet, grâce à un équilibre des forces optimisé entre la poussée du vérin et le poids du patient, ce châssis permet à la fois une aide à la verticalisation ET une aide au passage à la position allongée.

Comme la plupart de nos châssis, il permet de recevoir les coques ventrales ou dorsales avec plusieurs choix de fixations possibles.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité et certains ajustements, comme des roues plus grandes ou une position horizontale rabaissée, permettront de faciliter les transferts.

- **Système Up&Turn**
- **Modulable**
- **Transferts facilités**

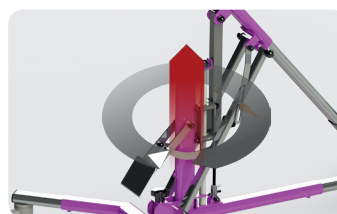

Pédale de levier du système Up&Turn



Pièces adaptées pour patient adulte: grandes roues Roller et fixations renforcées



version postérieure



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dimensions châssis | Largeur avant: 500mm Largeur arrière: 660 à 830mm Longueur: 910 à 1500mm |
| Force du vérin | V600 : 600 Newton V800 : 800 Newton |
| Hauteur mât position allongée | 680mm |
| Hauteur sol/entre-jambes | 500 à 850 mm |
| Poids max utilisateur | V600 : 75kg V800 : 90kg |
| Références : SPYRO V600, SPYRO V800 | |

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

| | |
|--|---------------------|
|  | RAL 9005 Noir |
|  | RAL 7016 Gris |
|  | RAL 5022 Bleu nuit |
|  | RAL 5015 Bleu clair |
|  | RAL 6018 Vert |
|  | RAL 1018 Jaune |
|  | RAL 2003 Orange |
|  | RAL 3020 Rouge |
|  | RAL 3015 Rose |
|  | RAL 4006 Violet |



OPTIONS

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| SPY 02 | SPY 05 | SPY 07B | TB001 / TB002 |
| Barre d'abduction fixation 60x30mm 14 trous Ø5 Longueur 500mm | Appui fessier | Charnières de fixation orientables (la paire), adaptables sur câle oméga CAM 03A | Tablette polyéthylène TB 001 largeur 560 mm et profondeur 500 mm TB 002 largeur 680 mm et profondeur 600 mm |



AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SPYRO



CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI SPYRO / version 21.09.2023 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com - www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016